



E-connect S

Endomotor con Localizador de Ápice Instalado



Calibración de Par
Para la salida precisa de par



Pantalla OLED
Pantalla OLED Digital



Pantalla Ambidiestra
La pantalla se puede girar según el uso con la mano izquierda o derecha




Potente Batería
Batería de litio de servicio pesado de 1500 mAh



MO - Modo Independiente de Localizador de Ápice



Barra de Localización de Ápice

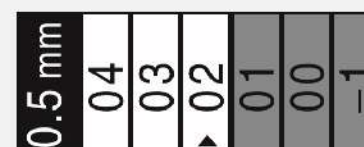

Barra de Zoom-in y Flash
(cuando la lima supera los 0.5 mm)

LOCALIZADOR DE ÁPICE

- **Control apical con instrumentos rotatorios**
La posición de la lima se muestra en la pantalla. Cuando la lima alcanza la longitud de trabajo apical pre-establecida, el motor rota en dirección reversa para evitar una instrumentación excesiva
- **Medición manual del canal**
El clip de la lima manual se puede utilizar para medir canales con precisión con la lima manual
- **Tecnología multifrecuencia con alta exactitud y precisión**
- **Barra de flash localizador de ápice con función de zoom-in**

Modos de Trabajo:

FWD - Rotación continua en sentido horario

REV - Rotación continua en sentido antihorario

REC - Movimiento de reciprocidad

El motor abierto inalámbrico de primera clase, el ángulo de rotación varía desde 30 ° a 370 °, y se puede alternar según necesidad de cada usuario

Característica de primera clase del ajuste de velocidad en modo de reciprocidad

ATC - Control de Par Adaptativo

ATC gestiona la presión de la lima de forma inteligente. Cuando se alcanza el límite de par, en vez de entrar en el modo de retroceso, el motor se mueve alternativamente hasta que se reduce la tensión. Una vez por debajo del nivel de torque pre-establecido, la lima continuará rotando nuevamente

Características del modo integrado:

- **Arranque y Parada Automáticos** -el motor comienza a funcionar cuando la lima ingresa al interior del canal radicular y se detiene cuando se retira
- **Retroceso Apical** - Cuando la lima alcanza el punto de retroceso apical pre-establecido, el usuario puede definir si la lima comienza a moverse en dirección inversa
- **Ralentización Apical** - Para proteger la unión cemento-dental y evitar la separación de lima, cuando la lima está en la zona apical, la velocidad del motor se reducirá

Especificaciones:

Rango de Velocidad de Rotación	: 120-1000 rpm
Rango de Par	: 0.5-4.0 N.cm
Programas de Memoria	: 11 (M0 a M10)
Capacidad de la Batería	: 1500 mAh